


# User manual

Electronic scale

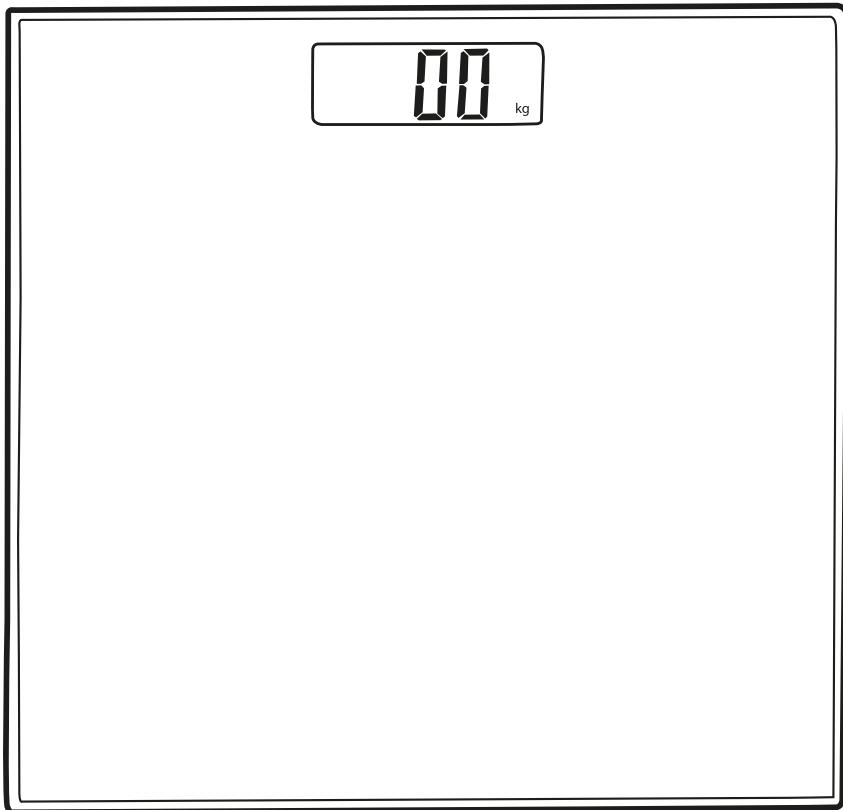

**EN |** Please retain instructions for future reference.

## SAFETY INSTRUCTIONS


### BATTERY WARNING:

#### KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- This product is not a toy.
- This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs.
- If any part of the appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury.
- Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/high humidity environment.
- This product is a high precision device; handle it with care.
- This product is intended for domestic use only.

### BATTERY SAFETY

- This product is supplied with 1 x CR2032 battery. Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.

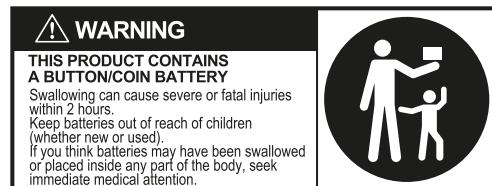

**WARNING:** If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

**CAUTION:** Vigilance must be maintained with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

There are no obvious specific symptoms when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). However, the child might exhibit the following symptoms:

- Coughing, gagging or drooling
- Appear to have a stomach upset or virus
- Vomiting
- Pointing to their throat or stomach
- Pain in their abdomen, chest or throat
- Tiredness and lethargy
- Be quieter or more clingy than usual
- Loss or reduction of appetite
- Refusal or inability to eat solid foods

These sorts of symptoms may fluctuate.

**A specific symptom of button or coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. Seek immediate medical attention if this occurs.**

### Care and maintenance

Wipe the exterior of the scale with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly.

Never immerse the scale in water or any other liquid.

Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the scale, as this could cause damage.

## Instructions for use

### Before first use

Loosen the battery safety screw and open the battery compartment on the underside of the scale.

Remove the plastic isolator tab from the battery compartment (if present) prior to use.

Check that the battery is inserted following the correct polarity. Close the battery compartment and tighten the battery compartment screw.

Position the scale on a firm flat surface.

For use on carpet, attach the enclosed carpet feet.

### Changing the Unit

**STEP 1:** Press the centre of the platform to turn on the scale.

**STEP 2:** Select kg, st or lb weight mode using the switch on the underside of the scale. The scale will then turn off.

### Setting the scale to zero

**STEP 1:** Press the centre of the glass platform and make sure no weight is on the scale. **[0.00/ZERO]** will be displayed.

**STEP 2:** The scale will switch off and is now ready for use.



**NOTE:** The zero-setting process must be repeated if the scale is moved. At all other times step straight on the scale.

### Using the electronic bathroom scale

**STEP 1:** Step on to the platform and stand still.

**STEP 2:** After 2–3 seconds the weight reading will be displayed.

**STEP 3:** Step off the platform; the weight reading will be displayed for several seconds before the scale turns off.



**NOTE:** It is recommended that readings are taken at the same time of day, preferably early evening and before a meal for the most consistent results.

### Troubleshooting

#### If the scale is not working properly:

Check the battery is fitted correctly.

Check that the correct unit is selected.

Make sure the scale is on a hard, flat surface and not touching a wall.

Repeat the zero-setting process.

### Warning indicators

**Lo** – Replace battery.

**EE / O-Ld** – Weight exceeds maximum capacity.

**Err** – Unstable weight. Stand still.

### Specifications

Product code: GENBATH1

Display: LCD

Battery: 1 x 3 V CR2032 button cell battery (included)

Units: kg/st/lbs

**FR |** Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### AVERTISSEMENT RELATIF À LA BATTERIE:

#### ARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

▪ Ce produit n'est pas un jouet.

▪ Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à

effectuer des réparations.

- Si toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
  - Ne placez, rangez ou utilisez le produit ni à proximité de la lumière directe du soleil ou de sources directes de chaleur, ni dans un environnement très humide.
  - Ce produit est un appareil de haute précision ; manipulez-le avec précaution.
  - Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- ### SÉCURITÉ LIÉE AUX PILES
- Ce produit est fourni avec 1 pile CR2032. Utilisez uniquement des piles du même type ou du même type que celles recommandées avec ce produit.
  - Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
  - Pour éviter toute fuite, retirez les piles usagées du produit.



#### AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON

L'ingestion peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, dans les 2 heures. Tenez les piles (neuves ou usagées) hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou se trouver dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

**AVERTISSEMENT:** si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

**ATTENTION:** il est essentiel d'être vigilant avec les piles boutons ou « plates » de recharge à la maison et avec les produits qui en contiennent.

Il n'y a pas de symptôme spécifique évident indiquant qu'une pile bouton est coincée dans l'œsophage d'un enfant. Toutefois, l'enfant peut présenter les symptômes suivants :

- Toux, suffocation ou salivation
- Maux d'estomac ou symptômes évoquant un virus
- Vomissements
- L'enfant montre sa gorge ou son ventre
- Douleur dans l'abdomen, la poitrine ou la gorge
- Fatigue et léthargie
- L'enfant est plus calme ou plus câlin que d'habitude
- Perte ou réduction de l'appétit
- Refus ou incapacité de manger des aliments solides

Ce genre de symptômes peut varier.

**Le fait de vomir du sang frais (rouge vif) constitue un symptôme spécifique à l'ingestion de piles boutons.**  
**Consultez immédiatement un médecin si cela se produit.**

### Entretien et maintenance

Nettoyez la surface extérieure de la balance à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis laissez sécher complètement. N'immergez jamais la balance dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la balance, car cela pourrait l'endommager.

### Mode d'emploi

#### Avant la première utilisation

Desserrez la vis de sécurité et ouvrez le compartiment à pile situé sous la balance.

Retirez la languette en plastique d'isolation du compartiment à pile avant utilisation (le cas échéant).

Assurez-vous que la pile est insérée en respectant la polarité. Fermez le compartiment à pile et serrez la vis du compartiment à pile.

Placez la balance sur une surface plane et stable.

En cas d'utilisation sur une moquette ou un tapis, fixez les pieds pour moquette fournis.

#### Changement d'unités

**ÉTAPE 1:** appuyez au centre du plateau pour allumer la balance.

**ÉTAPE 2:** sélectionnez le mode de pesée, kg, st ou lb, à l'aide du bouton situé sous la balance. La balance s'éteint.

#### Réglage de la balance sur zéro

**ÉTAPE 1:** appuyez au centre du plateau en verre et assurez-vous qu'aucun poids ne soit exercé sur la balance. [0.00/ZERO] s'affiche.

**ÉTAPE 2:** la balance s'éteint et est désormais prête à l'emploi.



**REMARQUE:** le processus de réglage de la balance sur zéro doit être répété si la balance est déplacée. Autrement, montez directement sur la balance.

#### Utilisation de la balance de salle de bain électronique

**ÉTAPE 1:** montez sur le plateau et restez immobile.

**ÉTAPE 2:** votre poids s'affiche au bout de 2 à 3 secondes.

**ÉTAPE 3:** descendez du plateau ; le poids s'affiche pendant quelques secondes, puis la balance s'éteint.



**REMARQUE:** il est recommandé de se peser à la même heure de la journée, de préférence en début de soirée et avant un repas, pour obtenir des résultats plus cohérents.

#### Dépannage

##### Si la balance ne fonctionne pas correctement:

Vérifiez que la pile est correctement installée.

Vérifiez que l'unité de pesée correcte est sélectionnée.

Assurez-vous que la balance se trouve sur une surface dure et plane et qu'elle ne touche pas un mur.

Répétez le processus de réglage de la balance sur zéro.

#### Voyants d'avertissement

**Lo:** remplacez la pile.

**EE / O-Ld:** le poids est supérieur à la capacité maximale.

**Err:** mesure instable. Restez immobile.

#### Caractéristiques

Code produit: GENBATH1

Écran: LCD

Batterie: 1 pile bouton 3 V CR2032 (fournie)

Unités: kg/st/lb

**NL |** Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### BATTERIJWAARSCHUWING: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

- Dit product is geen speelgoed.
- Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
- Als een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, in de buurt van directe warmtebronnen of in een vochtige omgeving.
- Dit product is een uiterst nauwkeurig apparaat; ga er voorzichtig mee om.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

### VEILIG ONGAAN MET BATTERIJEN

- Dit product wordt geleverd met 1 CR2032-batterij. Bij dit product mogen alleen batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type worden gebruikt.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.



#### WAARSCHUWING: DIT PRODUCT BEVAT EEN KNOOPCELBATTERIJ

Inslikken kan binnen 2 uur ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Houd batterijen (nieuw of gebruikt) buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingereskt of in het lichaam is geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

**WAARSCHUWING:** Als het batterijvakje niet goed kan worden gesloten, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.

**LET OP:** Wees voorzichtig met lege of reserve knoopcelbatterijen in de woning en de producten waarin deze zijn geplaatst.

Er zijn geen duidelijke specifieke symptomen wanneer een knoopcelbatterij vastzit in de slokdarm van een kind. Het kind kan echter de volgende symptomen vertonen:

- Hoesten, kokhalzen of kwijlen
  - Symptomen die lijken op maagklachten of een virus
  - Overgeven
  - Wijzen op de keel of de maag
  - Pijn in de buik, borst of keel
  - Vermoeidheid en lusteloosheid
  - Stiller of aanhankelijker zijn dan normaal
  - Verlies of vermindering van eetlust
  - Geen vast voedsel willen of kunnen eten
- Dit soort symptomen kunnen variëren.

**Een specifiek symptoom van het inslikken van knoopcelbatterijen is het braken van vers (helderrood) bloed. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk een arts.**

### Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de weegschaal schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Dompel de weegschaal niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de weegschaal schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

### Gebruiksaanwijzing

#### Vóór het eerste gebruik

Draai de veiligheidsschroef los en open het batterijcompartiment aan de onderkant van de weegschaal.

Verwijder vóór gebruik het plastic isolatielipje uit het batterijvak (indien aanwezig).

Zorg ervoor dat de batterij goed is geplaatst met de polen in de juiste richting.

Sluit het batterijvak en draai de schroef weer vast.

Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

Voor gebruik op tapijt bevestigt u de meegeleverde tapijtvoetjes.

#### De eenheid wijzigen

**STAP 1:** Druk op het midden van het weegplateau om de weegschaal in te schakelen.

**STAP 2:** Gebruik de knop aan de onderzijde van de weegschaal om de gewichtsmodus kg, st of lb te selecteren. De weegschaal wordt dan uitgeschakeld.

#### De weegschaal instellen op nul

**STAP 1:** Druk op het midden van het glazen weegplateau en zorg ervoor dat er geen gewicht op de weegschaal geplaatst is. **[0.00/ZERO]** wordt weergegeven.

**STAP 2:** De weegschaal wordt uitgeschakeld en is nu klaar voor gebruik.



**OPMERKING:** De instelling op nul moet worden herhaald als de weegschaal wordt verplaatst. Op ieder ander moment kunt u direct op de weegschaal stappen.

#### De elektronische badkamerweegschaal gebruiken

**STAP 1:** Stap op het weegplateau en sta stil.

**STAP 2:** Na 2-3 seconden wordt de gewichtswaarde weergegeven.

**STAP 3:** Stap van het weegplateau af. Het gewicht wordt nog enkele seconden weergegeven voordat de weegschaal uitschakelt.



**OPMERKING:** Voor de meest consistenten resultaten wordt aanbevolen om de metingen altijd op hetzelfde moment van de dag te doen, bij voorkeur vroeg in de avond en vóór een maaltijd.

#### Problemen oplossen

##### Als de weegschaal niet goed werkt:

Controleer of de batterij goed is geplaatst.

Controleer of de juiste eenheid is geselecteerd.

Zorg ervoor dat de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond staat en geen muur aanraakt.

Herhaal de instelling op nul.

#### Waarschuwingen

Lo – batterij vervangen.

EE / O-Ld – Gewicht overschrijdt maximale capaciteit.

Err – Veranderlijk gewicht. Blijf stilstaan.

#### Specificaties

Productcode: GENBATH1

Scherm: LCD

Batterij: 1x CR2032-knoopcelbatterij van 3 V (meegeleverd)  
Eenheden: kg/st/lb

**DE** | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

## SICHERHEITSHINWEISE

### BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.

Wenn Teile des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkter Sonneneinstrahlung, direkten Wärmequellen oder in einer feuchten Umgebung/Umgabe mit hoher Luftfeuchtigkeit auf und lagern beziehungsweise verwenden Sie es dort auch nicht. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochpräzisionsgerät. Gehen Sie vorsichtig damit um.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

### BATTERIESICHERHEIT

Zum Lieferumfang des Produkts gehört eine CR2032 Batterie. Für dieses Produkt sollten nur Batterien verwendet werden, die dem empfohlenen Batterietyp entsprechen.

Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden. Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.



#### WANRUNG: DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFZELLE

Verschlucken kann innerhalb von 2 Stunden schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Bewahren Sie die Batterien (egal, ob neue oder gebrauchte) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

**WARNUNG:** Lässt sich das Batteriefach nicht sicher verschließen, nutzen Sie sie nicht länger und halten Sie sie von Kindern fern.

**ACHTUNG:** Bei Ersatzknopfzellen bzw. flachen Batterien, die sich im Haushalt und in Produkten befinden, müssen Sie besondere Vorsicht walten lassen.

Es gibt keine offensichtlichen spezifischen Symptome, wenn eine Knopfzelle im Ösophagus (Speiseröhre) eines Kindes feststeckt. Trotzdem weist das Kind eventuell die folgenden Symptome auf:

- Husten, Würgen oder Sabbern
- Anzeichen einer Magenverstimmung oder eines Virus
- Erbrechen
- Das Kind zeigt auf Hals oder Magen
- Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Hals
- Müdigkeit und Lethargie
- Das Kind ist ruhiger oder anhänglicher als sonst
- Keinen oder weniger Appetit

▪ Ablehnung von fester Nahrung oder Unfähigkeit, diese zu essen  
Diese Symptome schwanken.

**Ein spezifisches Symptom** dafür, dass Knopfzellen verschluckt wurden, ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.

### Pflege und Wartung

Wischen Sie die Waage von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tauchen Sie die Waage nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Waage zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

### Gebrauchsanweisung

#### Vor dem ersten Gebrauch

Lösen Sie die Sicherheitsschraube der Batterie und öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Waage.

Vor der Verwendung die Kunststoff-Lasche aus dem Batteriefach entfernen (sofern vorhanden).

Überprüfen Sie, ob die Batterie ordnungsgemäß und unter Einhaltung der richtigen Polung eingesetzt ist.

Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube des Batteriefachs fest.

Stellen Sie die Waage auf eine stabile, ebene Fläche.

Zur Verwendung auf Teppichen die mitgelieferten Filzgleiter anbringen.

#### Ändern der Einheit

**SCHRITT 1:** Drücken Sie auf die Mitte der Trittfäche, um die Waage einzuschalten.

**SCHRITT 2:** Wählen Sie über den Schalter auf der Unterseite der Waage den Modus zum Wiegen in kg, st oder lb aus. Die Waage schaltet sich dann aus.

#### Einstellen der Waage auf Null

**SCHRITT 1:** Drücken Sie auf die Mitte der Trittfäche aus Glas und stellen Sie sicher, dass sich kein Gewicht auf der Waage befindet. Es wird [0.00/ZERO] angezeigt.

**SCHRITT 2:** Die Waage schaltet sich aus und ist nun betriebsbereit.



**HINWEIS:** Der Vorgang zum Einstellen auf Null muss wiederholt werden, wenn die Waage bewegt wird. Ansonsten können Sie sich ganz normal auf die Waage stellen.

#### Verwenden der elektronischen Badezimmerwaage

**SCHRITT 1:** Steigen Sie auf die Trittfäche und stehen Sie still.

**SCHRITT 2:** Nach 2–3 Sekunden wird Ihr Gewicht angezeigt.

**SCHRITT 3:** Steigen Sie von der Trittfäche. Das Gewicht wird einige Sekunden lang angezeigt, bevor sich die Waage abschaltet.



**HINWEIS:** Es wird empfohlen, die Gewichtsmessungen zur gleichen Tageszeit, vorzugsweise am frühen Abend und vor einer Mahlzeit, durchzuführen, um möglichst konsistente Ergebnisse zu erzielen.

#### Fehlerbehebung

##### Wenn die Waage nicht ordnungsgemäß funktioniert:

Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist.

Prüfen Sie, ob die richtige Einheit ausgewählt ist.

Stellen Sie sicher, dass sich die Waage auf einer festen, ebenen Oberfläche befindet und keine Wand berührt. Wiederholen Sie den Vorgang zum Einstellen auf Null.

#### Warnanzeigen

**Lo** – Batterie austauschen.

**EE / O-Ld** – Waage ist überlastet.

**Err** – Instabiles Gewicht. Stehen Sie still.

#### Technische Daten

Produktcode: GENBATH1

Display: LCD

Batterien: 13 V CR2032-Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Einheiten: kg/st/lbs

**IT** I Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

##### AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. L'apparecchio può essere riparato solo da un elettricista qualificato.
- Se una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Non collocare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità della luce diretta del sole o di fonti di calore dirette o in un ambiente umido/dall'elevata umidità.
- Questo prodotto è un dispositivo ad alta precisione; maneggiarlo con cura.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

#### SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Questo prodotto viene fornito con 1 batteria CR2032. Con questo prodotto è necessario utilizzare solo batterie di tipo identico o equivalente rispetto a quello consigliato.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto per evitare perdite.



##### AVVERTENZA: QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONI

L'ingestione può causare lesioni gravi o mortali entro 2 ore. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini (sia nuove che usate). Rivolgersi immediatamente a un medico se si ha il sospetto che qualcuno possa aver ingerito le batterie o averle inserite in un orifizio del corpo.

**AVVERTENZA:** se il vano batteria non si chiude bene, non usare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.

**ATTENZIONE:** prestare la massima attenzione all'uso delle batterie "piatte" o a bottone in casa e all'interno dei prodotti.

La presenza di una batteria a bottone all'interno dell'esofago (canale esofageo) di un bambino non è facile da rilevare. Tuttavia, il bambino potrebbe sviluppare i seguenti sintomi o comportamenti:

- Conati, tosse o salivazione
- Apparente disturbo o virus gastrico
- Vomito

- Indicare la gola o lo stomaco
  - Dolore all'addome, al torace o alla gola
  - Stanchezza e apatia
  - Essere più silenzioso o cercare più attenzioni del solito
  - Perdita o diminuzione dell'appetito
  - Rifuto o incapacità di mangiare cibi solidi
- Questi tipi di sintomi possono variare.

**Un sintomo riconducibile specificatamente all'ingestione di batterie a bottone è il vomito con sangue (rosso brillante).**  
**In presenza di tale sintomo, consultare immediatamente un medico.**

#### Cura e manutenzione

Pulire la superficie esterna della bilancia con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare bene.

Non immergere la bilancia in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire la bilancia, onde evitare possibili danni.

#### Istruzioni per l'uso

##### Prima del primo utilizzo

Allentare la vite di sicurezza della batteria e aprire il vano batterie sulla parte inferiore della bilancia.

Rimuovere la linguetta di isolamento in plastica dal vano batteria (se presente) prima dell'uso.

Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente, rispettando la polarità.

Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

Per l'uso su tappeti, fissare gli appositi piedini.

#### Cambio unità

**FASE 1:** premere il centro della piattaforma per attivare la bilancia.

**FASE 2:** utilizzare l'interruttore sotto la bilancia per selezionare l'unità di misura desiderata tra chilogrammi, stone e libbre. La bilancia si spegne automaticamente.

#### Impostazione della bilancia su zero

**FASE 1:** premere il centro della pedana di vetro e assicurarsi che non vi sia alcun peso sulla bilancia. Verrà visualizzato il testo **[0.00/ZERO]**.

**FASE 2:** la bilancia si spegne ed è quindi pronta all'uso.



**NOTA:** se la bilancia viene spostata, è necessario ripetere il processo di impostazione su zero. In tutti gli altri casi, è sufficiente salire sulla bilancia.

#### Utilizzo della bilancia elettronica da bagno

**FASE 1:** salire sulla piattaforma e rimanere fermi.

**FASE 2:** il peso rilevato viene visualizzato dopo 2-3 secondi.

**FASE 3:** scendere dalla piattaforma; la lettura del peso viene visualizzata per alcuni secondi prima che la bilancia si spenga.



**NOTA:** si consiglia di pesarsi alla stessa ora del giorno, preferibilmente nel tardo pomeriggio e prima di un pasto abbondante.

#### Risoluzione dei problemi

##### Se la bilancia non funziona correttamente:

Verificare che la batteria sia inserita correttamente.

Verificare che sia selezionata l'unità corretta.

Assicurarsi che la bilancia si trovi su una superficie solida e

piana e non che non sia a contatto con la parete.  
Ripetere il processo di impostazione su zero.

#### Spie

**Lo:** sostituire la batteria.

**EE/O-Ld:** il peso supera la capacità massima.

**Err:** peso instabile. Restare fermi.

#### Specifiche

Codice prodotto: GENBATH1

Display: LCD

Batteria: 1 batteria a bottone CR2032 da 3 V (inclusa)

Unita: kg/st/lb

**ES I** Conserve estas instrucciones como referencia futura.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

#### ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Este producto no es un juguete.
- Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si alguna pieza no funciona correctamente, o si el dispositivo ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- No coloque, guarde ni use el producto cerca de la luz solar directa ni de fuentes de calor directas, ni en entornos húmedos o con un alto nivel de humedad.
- Este producto es un dispositivo de alta precisión; manéjelo con cuidado.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

#### SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERÍAS

- Este producto se suministra con 1 pila CR2032. Con este producto solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
- Las pilas se deben insertar con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben extraerse del producto para evitar fugas.



#### ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN

Su ingestión puede causar lesiones graves o mortales en 2 horas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños (ya sean nuevas o usadas). Si sospecha que han ingerido o introducido las pilas en cualquier parte de su cuerpo, acuda inmediatamente al médico.

**ADVERTENCIA:** Si el compartimento para las pilas no se cierra de forma correcta, no utilice el producto y manténgalo alejado de niños.

**PRECAUCIÓN:** Se debe extremar la vigilancia con las pilas "planas" o de botón que haya de repuesto, tanto por casa como en el propio producto.

No hay síntomas específicos evidentes que indiquen que el niño tiene una pila de botón atascada en el esófago. Sin embargo, puede que el niño muestre alguno de los siguientes síntomas:

- Tos, arcadas o babeo
- Apariencia de padecer un virus o malestar estomacal

- Vómitos
  - Señalarle la garganta o el estómago
  - Dolor en el abdomen, el pecho o la garganta
  - Cansancio y apatía
  - Estar más callado o pedir más atención que de costumbre
  - Pérdida o disminución del apetito
  - Se niega a comer alimentos sólidos o es incapaz de hacerlo
- Estos tipos de síntomas pueden variar.

**Un síntoma específico de la ingestión de pilas de botón es el vómito de sangre fresca (de color rojo brillante). Acuda inmediatamente al médico en ese caso.**

#### Cuidados y mantenimiento

Limpie la parte exterior de la báscula con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No sumerja la báscula en agua u otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la báscula, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

#### Instrucciones de uso

##### Antes del primer uso

Afloje el tornillo de seguridad del compartimento para las pilas situado en la parte posterior de la báscula y abra el compartimento.

Si la hay, retire la pestaña de plástico aislante del compartimento de las pilas antes de utilizar el dispositivo.

Compruebe que la pila se haya introducido correctamente, de modo que coincida con las marcas de polaridad.

Cierre el compartimento de la pila y apriete el tornillo.

Coloque la báscula sobre una superficie firme y plana.

Para utilizar la báscula sobre una alfombra, coloque las patas especiales incluidas.

##### Cambio de la unidad

**PASO 1:** Presione el centro de la plataforma para encender la báscula.

**PASO 2:** Seleccione el modo de peso en kg, st o lb con el botón de la parte posterior de la báscula. La báscula se apagará.

##### Puesta a cero de la báscula

**PASO 1:** Presione el centro de la plataforma de vidrio y asegúrese de que no haya peso en la báscula. Se mostrará [0.00/ZERO] en la pantalla.

**PASO 2:** La báscula se apagará y estará lista para su uso.



**NOTA:** El proceso de puesta a cero debe repetirse si se mueve la báscula. En el resto de casos, colóquese en posición recta sobre la báscula.

##### Uso de la báscula electrónica para baño

**PASO 1:** Póngase de pie sobre la plataforma y permanezca quieto.

**PASO 2:** Despues de 2 o 3 segundos, aparecerá su peso en la pantalla.

**PASO 3:** Baje de la plataforma; la lectura de peso se mostrará durante varios segundos antes de que se apague la báscula.



**NOTA:** Es recomendable que se pese a la misma hora del día, preferiblemente por las mañanas y antes de consumir alimentos, para obtener los resultados más precisos.

## Solución de problemas

### Si la báscula no funciona correctamente:

Compruebe que la pila está correctamente colocada.  
Compruebe que se ha seleccionado la unidad correcta.  
Asegúrese de que la báscula está sobre una superficie dura y plana, y que no toca la pared.  
Repita el proceso de puesta a cero.

### Indicadores de advertencia

**Lo:** Sustituir pilas.

**EE / O-Ld:** El peso supera la capacidad máxima.

**Err:** Peso inestable. Permanezca quieto.

### Especificaciones

Código de producto: GENBATH1

Pantalla: LCD

Pila: 1 pila de botón CR2032 de 3 V (incluida)

Unidades: kg/st/lb

**PL I** Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRODUKT NALEŻY PRZEHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

- Ten produkt nie jest zabawką.
- Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Urządzenie powinien naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk.
- Jeśli jakakolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo bądź została ona upuszczona lub zniszczona, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- Nie należy umieszczać, przechowywać ani używać produktu w pobliżu bezpośredniego źródła światła słonecznego lub ciepła, a także w wilgotnym miejscu lub w miejscu o dużej wilgotności.
- Ten produkt jest urządzeniem o wysokiej precyzji; należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

### BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Produkt jest dostarczany z 1 baterią CR2032. Do tego produktu należy wykorzystywać wyłącznie baterie zalecane przez producenta lub baterie podobnego typu.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej bieguności.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby uniknąć wycieku.



### OSTRZEŻENIE: TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ PASTYLKOWĄ

Połknięcie baterii grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią w ciągu 2 godzin. Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci (zarówno nowe, jak i zużyte baterie). W przypadku podejrzenia połknięcia lub umieszczenia baterii wewnętrz innej części ciała niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

**OSTRZEŻENIE:** Jeśli komora baterii nie zamkniemy się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania wagi i przechowywać ją poza zasięgiem dzieci.

**UWAGA:** Należy zachować czujność, stosując w domu „płaskie” lub zapasowe baterie guzikowe oraz produkty, które je zawierają.

Nie ma jednoznacznych objawów wskazujących na to, czy bateria pastylkowa utknęła w przełyku dziecka. Jednak dziecko może wykazywać następujące objawy:

- Nadmierny kaszel, krztuszenie się lub ślinienie
- Objawy wskazujące na wirus lub rozstrój żołądka
- Wymioty
- Wskazywanie przez dziecko na gardło lub żołądek
- Ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła
- Zmęczenie i letarg
- Zachowywanie się ciszej lub częstsze przytulanie
- Utrata lub zmniejszenie apetytu
- Odmowa lub niemożność spożycia stałej żywności

Objawy tego typu mogą się różnić.

**Specyficznym objawem połknięcia baterii pastylkowej są wymioty zawierające świeżą krew (jasnoczerwoną).** W takim przypadku należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

### Konserwacja

Wytrzyj zewnętrzną część wagi za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i dokładnie osusz.

Nie wolno zanurzać wagi w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia wagi nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

### Instrukcja obsługi

#### Przed pierwszym użyciem

Poluzuj śrubę zabezpieczającą akumulator i otwórz komorę akumulatora na spodzie wagi.

Przed użyciem wyjmij plastikową osłonkę z komory baterii (jeśli występuje).

Włożyć baterię zgodnie z oznaczeniami biegunów.

Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

Ustaw wagę na płaskiej i twardzej powierzchni.

Aby używać wagi na dywanie, należy przymocować dołączone nóżki.

#### Zmiana jednostek

**KROK 1:** Naciśnij środek platformy, aby wyłączyć wagę.

**KROK 2:** Wybierz jednostkę (kg – kilogramy, st – kamienie lub lb – funty) pryciskiem na spodzie wagi. Waga wyłączy się automatycznie.

#### Zerowanie wagi

**KROK 1:** Naciśnij środek szklanej platformy, ale nie kładź na nie żadnego ciężaru. [0.00/ZERO] pojawi się na wyświetlaczu.

**KROK 2:** Waga wyłączy się i będzie gotowa do użyciu.



**UWAGA:** W razie przesunięcia wagi należy powtórzyć proces zerowania wagi. W innych przypadkach należy od razu wejść na wagę.

#### Korzystanie z elektronicznej wagi łazienkowej

**KROK 1:** Wejdź na platformę i stań nieruchomo.

**KROK 2:** Po 2–3 sekundach zostanie wyświetlony odczyt wagi ciała.

**KROK 3:** Zejdź z platformy. Odczyt wagi będzie widoczny przez kilkanaście sekund, a potem waga się wyłączy.



**UWAGA:** Dla spójności wyników zaleca się, aby odczyty były wykonywane o tej samej porze dnia, najlepiej wczesnym wieczorem i przed posiłkiem.

## Rozwiązywanie problemów

### Jeśli waga nie działa prawidłowo:

Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zamontowana.  
Sprawdź, czy wybrana jest prawidłowa jednostka.  
Sprawdź, czy waga ustawiona jest na twardziej, płaskie powierzchni i nie dotyka ścian.  
Powtórz proces zerowania wagi.

### Kontrolki ostrzegawcze

**Lo** – bateria wymaga wymiany.

**EE / O-Ld** – ciężar przekracza limit.

**Err** – niestabilna waga. Należy stać nieruchomo.

### Dane techniczne

Kod produktu: GENBATH1

Wyświetlacz: LCD

Bateria: 1 x bateria pastylkowa CR2032 3 V (w zestawie)

Jednostki: kg/st/lbs

**HU** | Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

### AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ

- Ez a termék nem játék.
  - A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A javítást kizárálag szakképzett villany szerelő végezheti.
  - Ha a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessse fel a készülék használatát.
  - Ne helyezze, tárolja vagy használja a terméket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak kitéve, valamint nedves/páras környezetben.
  - Ez a termék nagy pontosságú eszköz; óvatosan kezelje.
  - Ez a termék kizárálag háztartási célú használatra szolgál.
- ### ELEMBIZTONSÁG
- A terméket 1 db CR2032 elemmel szállítjuk. Ez a termék csak ugyanolyan vagy a javasolttal egyenértékű elemmel használható.
  - Az elemet a helyes polaritás szerint kell behelyezni.
  - A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből a szívárgás elkerülése érdekében.



### FIGYELEM: EZ A TERMÉK GOMBELEMENT TARTALMAZ

Lenyelése súlyos, akár halálos sérüléseket okozhat 2 órán belül. Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva (új és használt elemek esetén egyaránt). Ha úgy véli, hogy az elemeket lenyelték, vagy valamely teszt részbe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.

**FIGYELEM:** Amennyiben az elem rekesze nem záródik biztonságosan, szüntesse be a készülék használatát, és tartsa azt gyermekektől távol.

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig legyen elővigyázatos a lakásban vagy a termékekben található lemerült és tartalék gombelemekkel.

Nincsenek nyilvánvaló specifikus tünetei annak, ha a gyermek nyelőcsövébe gombelem szorul. Azonban a gyermek a következő tüneteket mutathatja:

- Köhögés, öklendezés vagy nyáladzás
  - Enyhe gyomorpanasz vagy vírusos tünet
  - Hányás
  - A torkára vagy a gyomrára mutat
  - Hasi, mellkasi fájdalom vagy torokfájás
  - Fáradékonyaság és levertség
  - A szokásosnál csendesebb vagy ragaszkodóbb
  - Étvágylalanság vagy étvágycsökkenés
  - Képtelen vagy nem hajlandó szírál előtt fogyasztani
- Az ilyen jellegű tünetek ingadozhatnak.

**A gombelem lenyelésének specifikus tünete a friss (élénkpiros) vér hánysága. Ha ilyet észlel, azonnal forduljon orvoshoz.**

### Ápolás és karbantartás

A mérleg külsejét törölje le puha, nedves ruhával, majd hagyja alaposan megszáradni.

Soha ne merítse a mérlegelet vízbe vagy más folyadékba. A mérleg tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy szírószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

### Használati útmutató

#### Az első használat előtt

Lazítsa meg az elemtartó biztonsági csavarját, és nyissa fel a mérleg alján található elemtartót.

Használat előtt távolítsa el a műanyag leválasztó fület az elemtartóból (amennyiben van ilyen).

Ellenőrizze, hogy az elem a polaritásnak megfelelően van-e behelyezve.

Zárja le az elemtartót, és húzza meg az elemtartó biztonsági csavarját.

Helyezze a mérlegelet sík, vízszintes felületre. A szönyegen történő méréshez rögzítse a mellékelt lábakat.

### Mértékegység váltása

**1. LÉPÉS:** Nyomja meg a mérőlap középét a mérleg bekapcsolásához.

**2. LÉPÉS:** A mérleg alján található kapcsolóval válassza ki a kg, st vagy lb mérési módot. A mérleg ekkor kikapcsol.

### A mérleg beállítása nullára

**1. LÉPÉS:** Nyomja meg az üveg mérőlap középét, és győződjön meg arról, hogy nincs súly a mérlegen. A kijelzőn megjelenik a [0.00/ZERO] felirat.

**2. LÉPÉS:** A mérleg kikapcsol és készen áll a használatra.



**MEGJEGYZÉS:** A nullára állítás folyamatát meg kell ismételni, ha a mérleg elmozdult. minden egyéb esetben lépj enyenesen a mérlegre.

### Az elektronikus fürdőszobai mérleg használata

**1. LÉPÉS:** Lépj enyeres mérlegre, és maradjon mozdulatlan.

**2. LÉPÉS:** 2–3 másodperc után a mért súly megjelenik a kijelzőn.

**3. LÉPÉS:** Lépj enyeres mérlegre; a mért súly megjelenik a kijelzőn, majd pár másodperc múlva kikapcsol a mérleg.



**MEGJEGYZÉS:** A következetes eredmények érdekében ajánlott minden ugyanabban az időpontban elvégezni a mérést, lehetőség szerint kora este, evés előtt.

## Hibaelhárítás

### Ha a mérleg nem működik megfelelően:

Ellenorízze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve.  
Ellenorízze, hogy a megfelelő mértékegység van-e kiválasztva.  
Győződjön meg arról, hogy a mérleg kemény, sűk felületen van, és nem ér hozzá a falhoz.

Ismételje meg a nullára állítás folyamatát.

### Figyelmeztető jelzések

**Lo** – Cserélje ki az elemet.

**EE/O-Ld** – A súly meghaladja a maximális kapacitást.

**Err** – Instabil súly. Maradjon mozdulatlan.

### Műszaki adatok

Termékkód: GENBATH1

Kijelző: LCD

Elem: 1 db 3 V-os CR2032 gombelem (a csomag tartalmazza)

Mértékegységek: kg/st/lbs

**EL** | Phuládikte tis oδηγίες γia μελλοντική αναφορά.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

- Autó το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Το προϊόν αυτό δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Οι επισκευές πρέπει να επιχειρούνται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
- Αν οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε, αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άμεσες πηγές θερμότητας ή σε υγρό περιβάλλον.
- Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή υψηλής ακρίβειας, χειρίστετε το με προσοχή.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν παρέχεται με 1 μπαταρία CR2032. Χρησιμοποιείτε με αυτό το προϊόν μόνο μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με αυτές που συνιστώνται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν προς αποφυγή διαρροής.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η κατάστοση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό εντός 2 ωρών.

Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά (καινούργιες ή χρησιμοποιημένες). Αν πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι μπαταρίες να έχουν καταποθετεί ή να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε επειγόντως ιατρική βοήθεια.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πρέπει να βρίσκεστε σε εγρήγορση στο σπίτι όσον αφορά τις «επίπεδες» ή εφεδρικές μπαταρίες ρολογιών και τα προϊόντα που τα περιέχουν.

Δεν υπάρχουν εμφανή συγκεκριμένα συμπτώματα όταν μια μπαταρία ρολογιού κολλήσει στον οισοφάγο ενός παιδιού. Ωστόσο, το παιδί ενδέχεται να παρουσιάσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

- Βήχας, ναυτία ή σάλια
- Να έχει στομαχική διαταραχή ή ίωση
- Εμετό
- Να δειχνεί τον λαιμό ή το στομάχι του
- Πόνος στην κοιλιακή χώρα, τον θώρακα ή τον λαιμό του
- Κόπωση και λήθαργος
- Να είναι πιο ήσυχο ή πιο προσκολλημένο από ό, τι συνήθως
- Απώλεια ή μείωση της όρεξης
- Αρνηση ή αδυναμία να καταναλώσει στερεά τρόφιμα Αυτού του είδους τα συμπτώματα μπορεί να αυξημειώνονται.
- Ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα κατάποσης μπαταρίας ρολογιών είναι ο εμετός φρέσκου αίματος (έντονο κόκκινο). Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

### Φροντίδα και συντήρηση

Σκοπίστε το εξωτερικό της ζυγαριάς με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

### Οδηγίες χρήσης

#### Πριν από την πρώτη χρήση

Χαλαρώστε τη βίδα ασφαλείας της μπαταρίας και ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την πλαστική γλωττίδα απομόνωσης από τη θήκη της μπαταρίας (έαν υπάρχει). Ελέγχετε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.

Κλείστε τη θήκη μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα της θήκης μπαταρίας.

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για χρήση σε χαλιά, προσαρτήστε τα πέλματα για χαλιά που περιλαμβάνονται.

### Αλλαγή της μονάδας

**BHMA 1:** Πιέστε το κέντρο της πλατφόρμας για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

**BHMA 2:** Επιλέξτε τη λειτουργία βάρους kg (κιλό), st (λίθος) ή lb (λίβρα) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί στη συνέχεια αυτόματα.

### Μηδενισμός της ζυγαριάς

**BHMA 1:** Πιέστε το κέντρο της γυάλινης πλατφόρμας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βάρος στη ζυγαριά. Θα εμφανιστεί η ένδειξη [0.00/ZERO].

**BHMA 2:** Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί και θα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαδικασία μηδενισμού πρέπει να επαναληφθεί αν η ζυγαριά μετακινηθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, να ανεβαίνετε αμέσως στη ζυγαριά.

### Χρήση της ηλεκτρονικής ζυγαριάς μπανίου

**BHMA 1:** Ανεβαίνετε στην πλατφόρμα και σταθείτε ακίνητοι.

**BHMA 2:** Μετά από 2–3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η

ένδειξη βάρους.

**BHMA 3:** Κατεβείτε από την πλατφόρμα. Η ένδειξη βάρους θα εμφανιστεί για αρκετά δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί η ζυγαριά.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η λήψη μετρήσεων την ίδια ώρα της ημέρας, κατά προτίμηση νωρίς το βράδυ και πριν από ένα γεύμα για πιο σαφή αποτελέσματα.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

#### Αν η ζυγαριά δεν λειτουργεί σωστά:

Ελέγχετε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.

Ελέγχετε αν έχει επιλεγεί η σωστή μονάδα.

Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά βρίσκεται σε οκληρή, επίπεδη θέση και δεν ακουμπάει σε τοίχο.

Επαναλάβετε τη διαδικασία μηδενισμού.

#### Ενδείξεις προειδοποίησης

**Lo** – Αντικατάσταση μπαταρίας.

**EE / O-Ld** – Το βάρος υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα.

**Err** – Ασταθές βάρος. Σταθείτε ακίνητοι.

### Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: GENBATH1

Οθόνη: LCD

Μπαταρία: 1 μπαταρία ρολογιού 3 V CR2032 (περιλαμβάνεται)

Μονάδες: kg/st/lbs

**DA I** Gem vejledningen til fremtidig reference.

### SIKKERHEDSVEJLEDNING

#### BATTERIADVARSEL: OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

- Dette produkt er ikke legetøj.
- Dette produkt har ingen brugerudskiftelige dele. Reparationer bør kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Hvis en del af apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget, skal du straks holde op med at bruge produktet for at undgå mulig personskade.
- Produktet må ikke placeres, opbevares eller bruges i nærheden af direkte sollys, direkte varmekilder eller under forhold med høj luftfugtighed.
- Dette produkt er en højpræcisionsehed. Håndtér med forsigtighed.
- Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

### BATTERISIKKERHED

- Dette produkt leveres med 1x CR2032-batteri. Der bør kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede til dette produkt.
- Batterierne skal isættes, så de vender rigtigt.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet for at undgå lækage.



#### ADVARSEL: DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET KNAPELLEBATTERI

Indtagelse kan medføre alvorlige eller fatale skader inden for 2 timer. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn (uanset om de er nye eller brugte). Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være blevet slugt eller puttet ind i eventuelle kropsåbnninger, skal du straks søge lægehjælp.

**ADVARSEL:** Hvis batterirummet ikke lukker helt tæt, skal du holde op med at benytte produktet og opbevare det uden for børns rækkevidde.



**FORSIGTIG:** Hold øje med "flade" eller ekstra knapcellebatterier i hjemmet og de produkter, der indeholder dem.

Der er ingen åbenlyse specifikke symptomer, når et knapcellebatteri sidder fast i et barns spiserør (ösophagus). Barnet kan dog udvise følgende symptomer:

- Hoste, kvalme eller savlen
- Tegn på maveonde eller virusinfektion
- Opkastning
- Peger mod hals eller mave
- Smertær i mave, bryst eller hals
- Træthed og sløvhed
- Er mere stille eller pylret end normalt
- Manglende eller nedsat appetit
- Manglende vilje eller evne til at indtage fast føde

Disse typer symptomer kan variere.

**Et specifikt symptom på indtagelse af et knapcellebatteri er opkastning af friskt (klart rødt) blod. Søg omgående lægehjælp, hvis dette sker.**

### Pleje og vedligeholdelse

Tør vægten yderside af med en blød, fugtig klud, og lad den tørre helt.

Nedsænk aldrig vægten i vand eller andre væsker.

Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler eller skuresvampe til rengøring af vægten, da dette kan beskadige den.

### Brugsanvisning

#### Før første brug

Løsn batteriets sikkerhedsskrue, og åbn batterirummet på vægtenens underside.

Fjern plastisoleringstappen (hvis relevant) fra batterirummet før brug.

Kontrollér, at batteriet er sat i, og at det vender rigtigt.

Luk batterirummet, og spænd skruen til batterirummet.

Placér vægten på en fast, flad overflade.

Sæt de medfølgende tæpperfodder på til brug på tæpper.

#### Ændring af måleenhed

**TRIN 1:** Tryk på midten af platformen for at tænde for vægten.

**TRIN 2:** Vælg enten kg, st eller lb som måleenhed med kontakten på vægtenens underside. Vægten slukker derefter automatisk.

#### Nulstilling af vægten

**TRIN 1:** Tryk på midten af glasplatformen, og sorg for, at der ikke er nogen belastning på vægten. **[0.00/ZERO]** vises.

**TRIN 2:** Vægten slukker og er nu klar til brug.



**BEMÆRK:** Nulstillingsprocessen skal gentages, hvis vægten flyttes. På alle andre tidspunkter skal du træde lige op på vægten.

### Brug af den elektroniske badevægt

**TRIN 1:** Træd op på platformen, og stå stille.

**TRIN 2:** Vægtaflæsningen vil blive vist efter 2–3 sekunder.

**TRIN 3:** Træd ned fra platformen. Vægtaflæsningen vises i flere sekunder, før vægten slukkes.



**BEMÆRK:** Det anbefales, at der foretages aflæsninger samme tid på dagen, helst tidligt om aftenen og for et måltid, for at opnå så ensartede resultater som muligt.

## Fejlfinding

### Hvis vægten ikke fungerer korrekt:

Kontrollér, at batteriet sidder korrekt.

Kontrollér, at den korrekte enhed er valgt.

Sørg for, at vægten står på en hård, flad overflade og ikke berører en væg.

Gentag nulindstillingsprocessen.

## Advarselsindikatorer

**Lo** – udskift batteriet.

**EE / O-Ld** – vægten overstiger den maksimale kapacitet.

**Err** – ustabil vægt. Stå stille.

## Specifikationer

Produktkode: GENBATH1

Display: LCD-

batteri: 1 x 3 V CR2032 knapcellebatteri (medfølger)

Enheder: kg/st/lbs

**FI** | Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

## TURVAOHJEET

### PARISTOVAROITUS: SÄILYTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

- Tämä tuote ei ole lelu.
- Tässä tuotteessa ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata tuotteen.
- Jos jokin laitteen osa on viallinen tai laite on pudotettu tai vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi.
- Älä säilytä tai käytä tuotetta lähettilä suoraa auringonpaistetta tai suoria lämmönlähteitä tai kosteassa ympäristössä.
- Tämä tuote on tarkka mittalaite. Käsittele sitä varoen.
- Tuote on tarkoitettu vain kotikäytöön.

## PARISTOJEN TURVALLISUUS

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan yksi CR2032-paristo. Tässä tuotteessa käytettävien paristotyyppejen on vastattava suosituksia.
- Paristot on asennettava oikein pään.
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta, jotta ne eivät vuoda tuotteen sisäänsä.



### VAROITUS: TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ NAPPIPARISTON

Pariston nielaiseminen voi aiheuttaa vakavia vammoja kahden tunnin sisällä. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos on syytä epäillä, että paristo on joutunut nieluun tai muualle kehon sisälle, ota välittömästi yhteyttä lääkärin.

**VAROITUS:** Jos paristokoteloa ei mene kunnolla kiinni, lopeta laitteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

**MIESTUTUS:** Käsittele nappiparistoja ja niitä sisältäviä tuotteita tarkkaavaisesti.

Nappipariston juuttuminen lapsen ruokatorveen ei aiheuta mitään tiettyjä selkeästi havaittaviaoireita. Jos näin on kuitenkin tapahtunut, lapsessa voi havaita seuraaviaoireita:

- Yksiminen, kakistelu tai kuolaaminen
- Vatsataudin oireet
- Oksentaminen
- Kurkun tai vatsan alueelle osoittaminen
- Vatsa-, rinta- tai kurkkukipu
- Väsymys ja uneliaisuus

▪ Tavanomaista hiljaisempi tai takertuvaisempi käytös

▪ Ruokahanlu menetys

▪ Kiinteiden ruokien syöntivaikeudet

Tällaiset oireet saattavat vahindella.

**Erityisesti nappiparistojen nielaisemiseen liittyvä oire on kirkkaan punaisen veren oksentaminen. Ota tällöin välittömästi yhteyttä lääkärin.**

## Huolto ja kunnossapito

Pyyhi vaaka pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.

Älä koskaan upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä puhdista vaakaa voimakkailta tai naarmuttavilla puhdistusaineilla tai naarmuttavilla välineillä, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

## Käyttöohjeet

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Löysää vaa'an alapuolella olevan paristolokeron ruuvia ja aava lokero.

Poista mahdollinen muovieriste paristokotelosta ennen käyttöä.

Varmista, että paristo on paikoillaan navat oikein päin.

Sulje paristolokero ja kiristä lokeron ruuvi.

Aseta vaaka tasaiselle, kiinteälle alustalle.

Jos haluat käyttää vaakaa maton päällä, kiinnitä siihen tukijalat.

## Yksikön vaihtaminen

**VAIHE 1:** Käynnistä vaaka painamalla sen keskustaa.

**VAIHE 2:** Valitse kg (kilo)-, st (stone)- tai lb (pauna) -painotila vaa'an alapuolella olevalla kytkimellä. Vaaka sammuu.

## Vaa'an asettaminen nollaan

**VAIHE 1:** Varmista, ettei vaa'alla ole painoa, ja paina lasilustan keskustaa. **[0.00/ZERO]** tulee näyttöön.

**VAIHE 2:** Vaaka sammuu ja on nyt käyttövalmis.

## Digitalisen henkilövaa'an käyttö

- VAIHE 1:** Astu alustalle ja seiso paikallasi.
- VAIHE 2:** Painolukema näkyy 2–3 sekunnin kuluttua.
- VAIHE 3:** Astu pois vaa'alta. Painolukema näkyy usean sekunnin ajan ennen kuin vaaka sammuu.

## Vianmääritys

### Jos vaaka ei toimi kunnolla:

Tarkista, että paristo on oikein päin.

Varmista, että olet valinnut oikean yksikön.

Varmista, että vaaka on kovalla ja tasaisella alustalla eikä kosketa seinää.

Aseta vaaka nollaan udelleen.

## Varoitustiedot

**Lo** – Vaihda paristo.

**EE/O-Ld** – Paino ylittää enimmäiskapasiteetin.

**Err** – Epävakaa paino. Seiso paikallasi.

## Tekniset tiedot

Tuotekoodi: GENBATH1

Näyttö: LCD

Akku: 1 x 3 V CR2032 -nappiparisto (sisältyy pakkaukseen)

Mittayksiköt: kg/st/lbs

**SV** I Spara instruktionerna för framtida bruk.

## SÄKERHETSANVISNINGAR

### BATTERIVARNING: FÖRVARA PRODUKTEN UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

- Den är inte en leksak.
- Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Reparationer får endast utföras av auktoriserad elektriker.
- Om någon del av apparaten är trasig eller om den har tappats eller skadats ska du omedelbart sluta använda produkten för att undvika potentiella skador.
- Placer, förvara eller använd inte produkten nära direkt solljus eller direkta värmekällor eller i fuktiga miljöer.
- Apparaten är en högprecisionssapparat. Hantera den försiktigt.
- Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.

### BATTERISÄKERHET

- Produkten levereras med 1 st. CR2032-batteri. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som de som rekommenderas får användas med denna produkt.
- Batterierna ska sättas i med polerna åt rätt håll.
- Ta ut uttjänta batterier ur produkten för att undvika läckage.



#### VARNING: DEN HÄR PRODUKTEN INNEHÄLLER ETT KNAPPCELLSBATTERI

Att svälja det kan orsaka svåra eller livshotande skador inom 2 timmar. Förvara batterier utom räckhåll för barn (både nya och använda). Om du tror att batterier kan ha svälts eller placerats inuti någon kroppsdel, sök omedelbar medicinsk hjälp.

**VARNING:** Om batteridörren inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten och förvara borta från barn.

**VARNING!** Var medveten om vilka reservknappcells batterier som finns i hemmet och vilka produkter som innehåller dem.

Det finns inga uppenbara specifika symptom när ett knappcells batteri sitter fast i ett barns esofagus (matstrupe). Barnet kan dock uppvisa följande symptom:

- hosta, får kväljningar eller drege
- verkar ha en upprörd mage eller ett virus
- kräkningar
- pekar mot halsen eller magen
- smärta i buken, bröstet eller halsen
- tröttet och slöhet
- tystance eller mer klängig än vanligt
- minskad eller förlorad appetit
- vill eller kan inte äta fast föda.

Dessa typer av symptom kan variera.

**Ett specifikt symptom på att knappcells batteriet har svälts är att man kräks färskt (klarrött) blod. Sök vård omedelbart om detta inträffar.**

## Skötsel och underhåll

Torka av vågens yta med en mjuk fuktig trasa och låt torka helt. Sänk aldrig ner vågen i vatten eller i någon annan vätska. Använd inte starka eller slipande rengörings- eller putsmedel för att rengöra vågen. Om du gör det kan den skadas.

### Bruksanvisning

#### Före första användning

Lossa batteriets säkerhetsskruv och öppna batterifacket på vågens undersida.

Ta bort plastisoleringsfliken från batterifacket (om det finns en) innan du använder vågen.

Se till att batteriet är ordentligt isatt åt rätt håll.

Stäng batteriluckan och dra åt skruven.

Placera vågen på en stabil plan yta.

För användning på mattor, sätt fast de medföljande gummerade fötterna.

#### Ändra mättenhet

**STEG 1:** Tryck på mitten av plattformen för att slå på vågen.

**STEG 2:** Välj kg, st. eller lb. med reglaget på undersidan av vågen. Vågen stängs automatiskt av.

#### Ställa in vågen på noll

**STEG 1:** Tryck på mitten av glasplattformen och se till att det inte finns någon vikt på vågen. [0.00/ZERO] visas.

**STEG 2:** Vågen stängs av och är sedan redo att användas.



**OBS!** Om du flyttar vågen måste du upprepa nollställningsprocessen. Om du inte har flyttat på den ställer du dig bara på den.

#### Använda den elektriska badrumsvägen

**STEG 1:** Ställ dig på plattformen och stå still.

**STEG 2:** Efter 2–3 sekunder visas din vikt.

**STEG 3:** Kliv på plattformen. Viktvärdet visas i några sekunder innan vågen stängs av.



**OBS!** Det rekommenderas att avläsningarna görs vid samma tid på dagen, helst tidigt på kvällen och före en måltid för att få så konsekventa resultat som möjligt.

#### Felsökning

##### Om vågen inte fungerar som den ska:

Kontrollera att batteriet är korrekt isatt.

Kontrollera att rätt enhet/viktläge har valts.

Se till att vågen står på en hård, plan yta och inte vidrör en vägg.

Upprepa nollställningsprocessen.

#### Varningsindikatorer

**Lo** – byt batteri.

**EE/O-Ld** – Vikten överskriden maxkapaciteten.

**Err** – Vikten är inte stabil. Stå stilla.

#### Specifikationer

Produktkod: GENBATH1

Skärm: LCD

Batteri: 1 st. 3 V CR2032-knappcells batteri (medföljer)

Enheter: kg/st/lbs







#### EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

**FR | Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques**

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veiller à contacter votre mairie, votre déchèterie locale ou le revendeur du produit.

**NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur**

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparatuur gevarende stoffen kunnen bevatzen die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugzenddiensten aan waarmee de gebruiker apparaat retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

**DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten**

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Haushaltmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altakkumulatoren und Bleibatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Diese separaten Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potentielle negativen Folgen für die Gesundheit und das Umwelt durch die in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten enthaltenen Substanzen zu verhindern, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelegte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei den örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

**ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos**

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto o cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debidas a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causadas por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

**IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esuate. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

**PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych**

Ten symbol na produkcji, baterii lub opakowaniu oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekażać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten proces zbierania w recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane przez nieuwłaszczenie i nieprawidłowe utylizację. Niektóre sprzedawcy detalni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, który umożliwia użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowy smaltowanie akumulatorów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

**HU | Hulladékakumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlansítása**

Ha ter mérnök, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot láttá, a termékét és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekkel szembenegyező előforduláson, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negativ hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlansítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavezetői szolgáltatókkal nyújtanak árnyalatot a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlansítás érdekében visszaadják a tönkörnyezeti és elektronikus berendezések ártalmatlansításáról további információkat vegye fel a kapcsolattartó a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkelővel vagy a kiskereskedővel.

**EL | Απόρριψη σμολάτων υποτροφών και πλαστικού εξόπλισμου**

Aυτό το σημάδι από πρώτη ότι μετατρέπεται στην οποίακειμένα που περιέχει δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οπακόδια απορρίφινα. Ανήκει στην οπακόδια απορρίφινα και πλαστικού εξόπλισμου. Αυτό το Εγκαύματος οπακόδια και ανακύκλωσης βοηθά στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της ανακύκλωσης συνεισφέρει στην περιβάλλον υγεία και την ανάπτυξη. Οριαρχία καταστήματα λανιάρισης μεταπλέξεων παραδοχής, οι οποίες εμπρέσουν στον χώρο να εμπλέκονται στο τέλος της ζωής του πατρινόλη απόρριψη. Απότομη εύθυνη προστασία τηγανώδουμα που τυγχάνει στο πλαστικό και ηλεκτρονικό εξόπλισμο πριν από την απόρριψη. Για περισσότερες πληροφορίες ουτάκια με το τού παρούσια τις μητρόπολις, την πλαστική και ηλεκτρονική απόβλητη, επικοινωνήστε με τα τοπικά γραφεία της πόλης σας, την υπηρεσία διεύθυνσης οικιακών απορριμμάτων ή τη καταστήματα λανιάρισης.

**DA | Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr**

Dette symbol på produktet, dets batterier eller dets emballage betyder, at dette produkt og eventuelle batterier, det indeholder, ikke må bortsættes sammen med hushållsnedsat. Det er derfor det brugeres ansvar at aflevere dem til et relevant indsamlingssted for genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særskilte indsamling og genanvendelse vil bidrage til at bevare naturessources og forhindre mulige negativ konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet på grund af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kan være farer for øget forurening af for eksempel vandhullerne. Nogle forhandlere har returstationer, som giver brugeren mulighed for at returnere dem tilbage med henblik på denne bortskaffelse. **Det er brugerenes ansvar at slætte alle data på elektrisk og elektronisk udstyr for bortskaffelse.** For yderligere oplysninger om, hvor batterier, elektrisk og elektronisk affald skal bortsættes, bedes du kontakte det lokale by-/kommunekontor, renovationsstænnet eller forhandleren.

**FI | Käytettyjen paristojen ja elektroniikkajätteen hävitättäminen**

Tämä tuoteessa, sen parissa tai pakkausessa näkyvä symboli tarkoittaa, että tästä tuotteesta ja mahdollisista paristoista ei saa hävittää talousjätteisen kanssa. Käytäjällä on sen sijaan vastuu viedä se sovilaan paristojen ja elektroniikkajätteen keräystapiseen. Erilaisen keräytäminen ja jätettäminen auttaa luonnon resursseja ja ympäristöä hoitamaan. Tämä on yleinen käytäjän osaavaa ja antaa vahvan kannan tietoisuuden siitä, että esimerkiksi ihmeellisesti aiheutuva mahdollisuus terveysvaaroja ja ympäristöhaavoja, jotka johtuvat paristojen ja elektroniikkatuotteiden mahdollisesti myrkyllisistäaineista, jota saatavat levitä riittämättömän hävityksen seurauksena. Tietysti haluamme myytävät tarjotavat palautuspalveluja, joiden avulla käytäjä voi palauttaa käytettyt tuotteet oikeaoppiesti hävitettäväksi. **Käytäjän vastuulla on polttaa mahdolliset tiedot elektroniikkatuoteiden muisteesta ennen niiden hävitättämisestä.** Lisätietoa paristojen ja elektroniikkajätteen keräystapisesta saat kaupungin/kunnan virastosta, jätteuhopitalipalvelusta tai jäteelimyyjältä.

**SV | Kassering av uttagna batterier och elektrisk och elektronisk utrustning**

Den här symbolen på produkten, dess batterier eller dess förpackning innebär att produkten och eventuella batterier som sitter i den inte får kasseras tillsammans med hushållsavfallet. Det är därför ansvarsfullt att lämna över dem till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av batterier och elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen bidrar till att bevara naturessources och förhindra mulige negativ konsekvenser för människors hälsa och miljön på grund av eventuell förekomst av farliga stoffer i batterier och elektrisk och elektronisk utrustning som kan orsakas av felaktig kassering. Vissa återförsäljare tillhandahåller återlämningstjänster så att användare kan lämna tillbaka uttagna utrustning för koriktig kassering. **Det är användarnas ansvar att radera alla data på elektrisk och elektronisk utrustning före kassering.** Om du vill ha mer information om var du kan lämna batterier samt elektrisk och elektroniskt avfall kontakta din kommun, återvinningsmyndigheten eller återförsäljaren.



UK ONLY  
Recycle



FR  
BAC DE TRI  
COLLECTION DE CARTES

IT  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
PAP 22  
COLLEZIONE DI CARTE



FR  
Cet appareil se recycle  
ou

FR  
À DÉPOSER EN MAGASIN  
ou  
À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Manufactured by:

Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggott Street Lower, Dublin D02 X658. ROI.

MADE IN CHINA.

CD300823/MD000000/V1